

GCS BIOLOGIE 85	LABO-FT728	Préconisation pour les examens réalisés par le patient	Signature de l'approbateur
	Version D		Dr Bénédicte LUREAU
	Page 23/24		Applicable le 15/08/2018


Annexe 22




Laboratoire du Centre Hospitalier
11, Rue du Docteur Laforge, 85201 FONTENAY LE COMTE tél : 02.51.53.29.31 - fax : 02.51.53.29.32

AUTO-PRELEVEMENT VAGINAL POUR PCR CHLAMYDIAE TRACHOMATIS et/ou NEISSERIA GONORRHOEAE


Se procurer le kit auprès du laboratoire

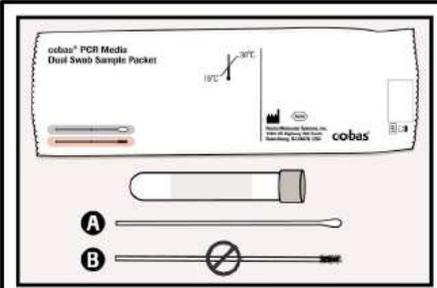


Le cobas[®] PCR Media Dual Swab Sample Kit contient les éléments suivants :
TUBE de cobas[®] PCR Media
Écouvillon tissé : A
Écouvillon fin floqué : B

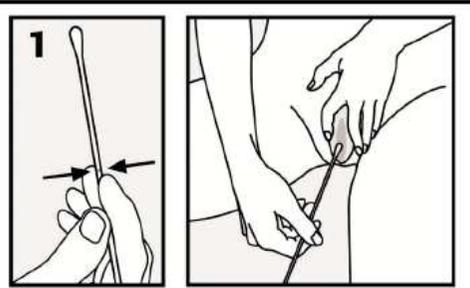


1. POSITIONNER : s'installer de façon confortable, tenir d'une main l'écouvillon tissé (écouvillon A) de sorte que la marque se trouve au-dessus de votre main. De l'autre main, maintenir les lèvres

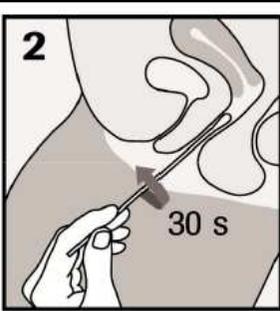



2. COLLECTER : insérer l'écouvillon à une profondeur d'environ 5 centimètres dans l'ouverture vaginale. Faire tourner doucement l'écouvillon pendant environ 30 secondes tout en le frottant contre les parois vaginales. Retirer soigneusement l'écouvillon. Avant de placer l'écouvillon dans le tube, veiller à ce qu'il n'entre en contact avec AUCUNE surface.

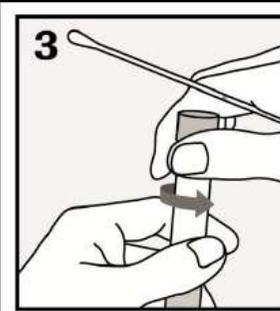

3. OUVRIR LE TUBE : retirer le bouchon du tube à l'aide de la main tenant déjà l'écouvillon, tel qu'indiqué ci-dessus.

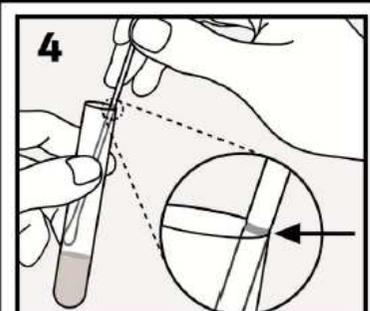

4. Insérer l'écouvillon dans le tube jusqu'à ce que la marque visible sur la tige soit alignée avec le bord supérieur du tube. Avant de briser la tige, s'assurer que l'extrémité de l'écouvillon ne soit pas immergée dans le liquide.

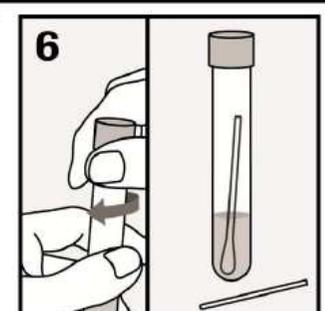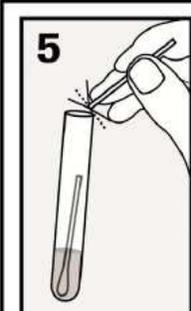

5. Incliner avec précaution l'écouvillon contre le bord du tube afin de briser la tige de l'écouvillon au niveau de la marque.
6. Fermer le tube de cobas[®] PCR Media en serrant bien le bouchon.

Fiche à compléter SVP

Nom :
Nom de naissance :
Prénom :
Date de naissance :
Tél. :

Date et heure du prélèvement :
le / /
à h

Prenez-vous ou avez-vous pris un antibiotique dans les 7 derniers jours ?
NON OUI

Si oui, lequel :

AVERTISSEMENT : Éviter tout contact du milieu pour PCR cobas[®] avec la peau, les yeux ou les membranes muqueuses. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.